

PERIFÉRICOS

PROFI CLASS

- Ultrassom para remoção de biofilme e mineralizado ou para tratamento endodôntico;
- Jato de bicarbonato;
- Exclusiva tecla seletora de potência para pontas diamantadas utilizadas em dentística;
- 4 níveis de rotação da bomba peristáltica.



PROFI NEO

- Ultrassom para remoção de biofilme e mineralizado ou para tratamento endodôntico;
- Jato de bicarbonato;
- Chave seletora para ajuste rápido da potência de remoção ou terapia endodôntica;
- 4 níveis de rotação da bomba peristáltica.



CARACTERÍSTICAS LINHA PROFI

- Bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplados;
- Sistema de varredura no jato de bicarbonato;
- Transdutor piezoelétrico com potência de 29.000 Hz;
- Válvula reguladora de pressão;
- Tips: 02 Perio Sub e 01 Perio Supra;
- Capas removíveis e autoclaváveis.

TIPS

Periodontia

Pontas indicadas para a remoção de cálculo dental em todas as superfícies dentais supra e sub gengivais.



Endodontia

Pontas indicadas para remoção de instrumentos fraturados, remoção de pinos intra radiculares, cimentos e etc.



PERIFÉRICOS

COMPRESSORES

- Protetor térmico contra sobreaquecimento e filtro de saída de ar;
- Motor isento de óleo;
- Baixo nível de ruído;
- Disponíveis nas versões 65L (atende até 2 consultórios) e 40L (atende 1 consultório).



AUTOCLAVE 12L OU 21L

- Câmara de esterilização em aço inox;
- Secagem com a porta entreaberta;
- Vedação da porta em silicone de alta performance;
- 3 bandejas internas (21L);
- 2 bandejas internas (12L);
- Tubulação interna em cobre;
- 18 Sistemas de segurança;
- Bi-volt.



BOMBA DE VÁCUO CICLONE

- Sucção de 500mm/Hg, com vazão de 200 litros/minuto, atende a demanda de até 4 consultórios;
- Motor com eixo de aço inox;
- Flange, rotor e tampa de bronze;
- Alta resistência à oxidação;
- Elevada vida útil;
- Potência de 1 ou ½ HP;
- Reduz em até 90% a microbiota suspensa, formada pelo spray da alta rotação ou do jato de bicarbonato.



COBERTURA ACÚSTICA COM DIMENSÕES REDUZIDAS*.

*Opcional.

IMPLANTES

IMPLANTES COMPONENTES

- Implantes com plataforma HE | HI | CM;
- Instalação por meio de chave de torque interno;
- Acompanha parafuso de cobertura;
- Completa linha de componentes.




MOTOR DE IMPLANTES E CONTRA-ÂNGULO

- Display LCD;
- Baixo nível de ruído;
- Ampla seleção de velocidade;
- Controle de torque preciso até 55N.cm;
- 3 pré-programações para perfuração;
- 2 pré-programações para inserção;
- Bomba peristáltica ajustável;
- Sem escovas (baixo nível de ruído e vibração, menor aquecimento e manutenção);
- Conta-ângulo redutor 20:1. Autoclavável.



KIT PROTÉTICO

- Sistema protético de fácil aplicação e usabilidade. Facilitando o dia a dia de protéticos e protesistas;
- Estojo autoclavável.

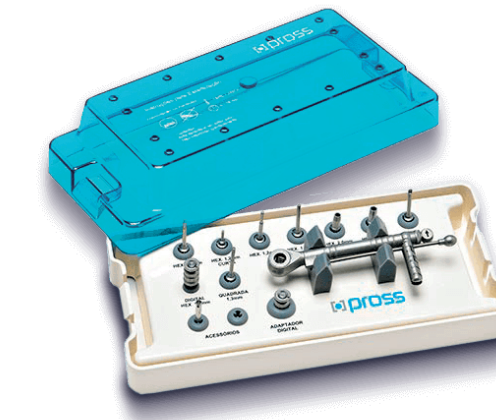

KIT CIRÚRGICO

- Completo kit cirúrgico com indicação visual por cor que facilita a usabilidade do cirurgião dentista;
- Estojo autoclavável.



PEÇAS DE MÃO

PEÇAS DE MÃO ALTA ROTAÇÃO

Tecnologia de ponta para os profissionais mais exigentes. A linha de alta rotação Dabi Atlante se adapta à necessidade do seu dia a dia.



PEÇAS DE MÃO BAIXA ROTAÇÃO

A Dabi Atlante possui uma completa linha de baixa rotação que, além dos tradicionais micromotor, peça reta e contra-ângulo 1:1, fazem parte do portfólio modelos com transmissão de 20:1 para sistemas rotatórios.

CARACTERÍSTICAS PEÇAS DE MÃO

- Sistema Push Button ou Friction Grip (saca-brocas);
- As peças de mão Dabi Atlante são produzidas com rolamentos com esferas de cerâmicas, elevando o desempenho e a longevidade da peça e diminuindo o nível de ruído;
- Conexão Borden, Midwest e Midwest com fibra óptica;
- Spray único ou triplo;
- Cabeça convencional ou reduzida;
- Autoclaváveis.

KIT ACADÊMICO

Composto de peça de mão de alta rotação, micromotor, contra-ângulo, peça reta, adaptador, estojo e óleo lubrificante.



IMAGEM

RAIOS X SELETRONIC

Qualidade superior de imagem com sistema de dupla colimação e comando inteligente.

- Controle digital ajustável ao biótipo do paciente;
- Personalização manual do tempo de exposição;
- Correção automática do tempo de exposição conforme oscilações da tensão elétrica da rede;
- Dupla colimação;
- Câmara de expansão;
- Bivolt com regulador de voltagem (item opcional);
- Modelo coluna móvel e parede.




RAIOS X ELETRONIC 70X

Simplicidade, rapidez e segurança sem formação de raios secundários.

- Câmara expansora em borracha especial;
- Bivolt com regulador de voltagem (item opcional);
- Coluna móvel com pés em U;
- Caixa de comando inteligente.



eagle.x

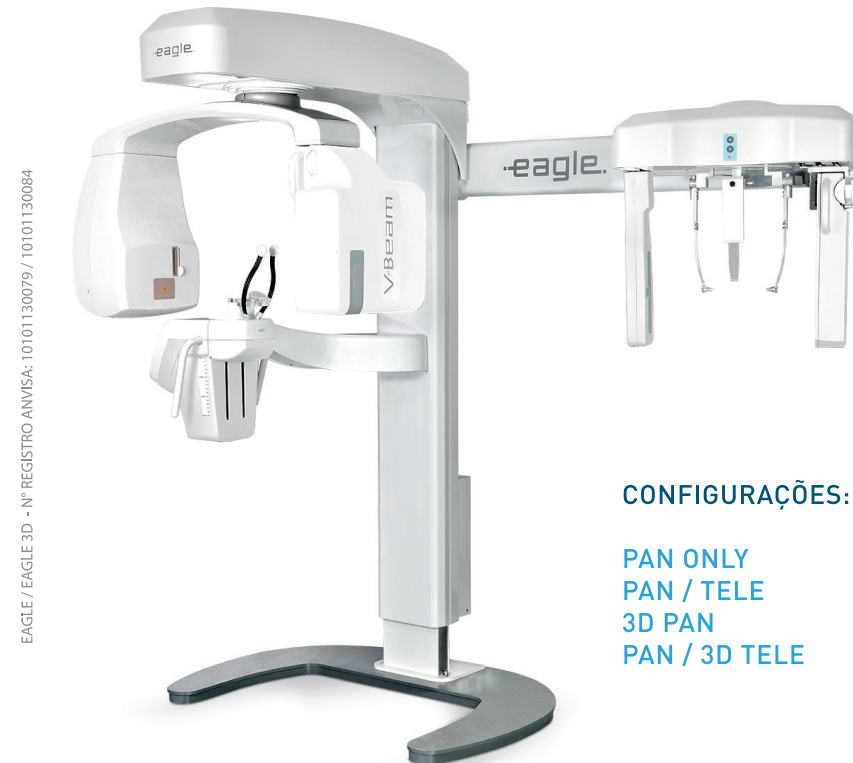

CONFIGURAÇÕES:

PAN ONLY
PAN / TELE
3D PAN
PAN / 3D TELE

- Upgrade entre versões;
- Voxel Isotrópico entre 80 e 500um;
- Posicionamento Face-to-Face;
- Software on demand 3D Dental;
- Único financiável através de FINAME e BNDES;
- Atendimento técnico por acesso remoto.



MULTIFOV



*Através da fusão de múltiplas imagens.

DABI ATLANTE

DABIATLANTE.COM.BR
0800 941 5650

COMPRE PELA LOJA VIRTUAL
lojadabi.com.br

FALE COM NOSSOS CONSULTORES PELO WHATS APP
16 99994.7842

Rodovia Abrão Assed KM 53 + 450m, Recreio Anhaguera
CEP 14097-500 - Ribeirão Preto - SP - Brasil

Fotos Ilustrativas. As cores podem ter sofrido alterações na reprodução gráfica. A Dabi Atlante reserva-se ao direito de realizar alterações no design especificações técnicas dos produtos mediante autorização da ANVISA para prosseguir no aperfeiçoamento do mesmo. Versão Jan/2019.

DABI ATLANTE

IMAGEM

EAGLE DIGITAL SENSOR

Seu olhar ainda mais apurado.

- Sensor Intraoral tamanho 2, área ativa de 26mm x 36mm;
- Compatível com a maioria dos equipamentos de Raios X Intraoral;
- Sensor com acabamento interno em silicone, mais resistente a quedas;
- Cabo de três metros, possibilitando maior distância entre o sensor e o computador;
- Cabo de fácil reposição;
- Instalação simplificada;
- Acompanha case para transporte;
- Ferramenta para edições de imagens, odontometria, odontograma, geração de laudos e cadastro de pacientes;
- Necessário sistema operacional Windows.



eagle.ps

Scanner de Placa de Fósforo.



- Portátil; plug and play com software de fácil instalação com amplo range de ferramentas para edição;
- Acompanha quatro placas intraorais de fósforo (3 no tamanho 2 e 1 no tamanho 0);
- Nível de cinza: 14 bits;
- Resolução (PL/mm, dpi): 25;
- Possui driver TWAIN para compatibilidade com outros softwares;
- Exporta para vários formatos, inclusive DICOM.

Placas de Fósforo Intraorais nos tamanhos: 0, 1, 2 e 3.

