



CATÁLOGO
DE PRODUTOS

5700
SOLUÇÃO INTELIGENTE

CONSULTÓRIOS



MAIS CONFORTO PARA VOCÊ.
MAIS COMODIDADE PARA SEU TRABALHO.



DIFERENCIAIS DOS CONSULTÓRIOS

1 ENCOSTO
ENVOLVENTE

2 ARTICULADOR
CENTRAL
DO ENCOSTO

3 CAPA
PROTETORA
LATERAL

4 BASE
ANTIDERRAPANTE
(CHAPA CORTE A LASER E
DEBRUM PARA EVITAR
DESLIZAMENTO)

5 PFDAL DE
COMANDO
(MOVIMENTOS DE VOLTA
A ZERO E 3 POSIÇÕES
DE TRABALHO)

6 ESTOFAMENTO
ANATÔMICO

7 ENCOSTO
BIARTICULADO

 LINHA
PNEUMÁTICO

Facilita o trabalho do profissional,
com movimentos precisos, gera
menor esforço e maior segurança
durante sua utilização.



CONSULTÓRIOS
ST100

MAIS CONFORTO PARA VOCÊ.
MAIS COMODIDADE PARA SEU TRABALHO.

 LINHA
FLEX

Braço fixo ajustável na coluna,
permite ao profissional melhor
adaptação e ergonomia.





LINHA CART

Permite maior mobilidade
de aproximação no ambiente
do consultório.



▶ CORES PARA **ESTOFADOS**



TERRACOTA 87



MARINE 76



ANGRA 88



TOPÁZIO 78



NOVAS OPÇÕES **CORES EXCLUSIVAS**



AMAZONAS 79



CELESTE 74

CARACTERÍSTICAS DOS CONSULTÓRIOS E PERIFÉRICOS




ENCOSTO BIARTICULADO

- Encosto de cabeça biarticulado, facilita o atendimento de cadeirantes e crianças. Macio, anatômico e com linhas arredondadas, oferece mais conforto ao paciente, principalmente em sessões longas.



ESTOFAMENTO ANATÔMICO

- Muito confortável e ergonômico.

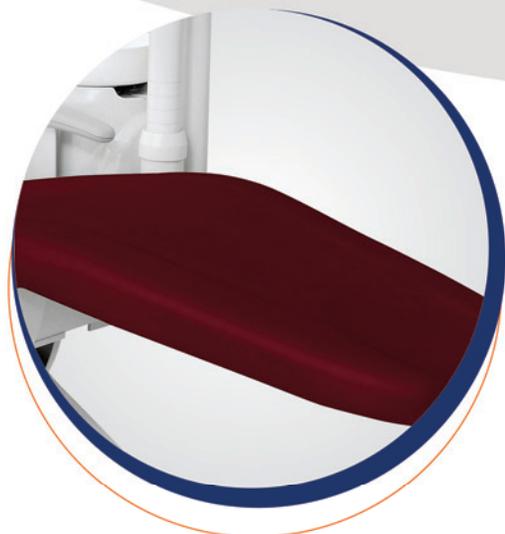

PEDAL DE COMANDO

- Otimiza o trabalho dos cirurgiões-dentistas com as funções volta a zero / posição de trabalho totalmente automatizadas.



CADEIRA

- Assento e encosto com movimentos de subida e descida;
- Assento com altura mínima de 34 cm e altura máxima de 73 cm;
- Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento;
- Sistema pantográfico de elevação;
- Braços direito e esquerdo;
- Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade);
- Encosto de cabeça biarticulado;
- Base da cadeira em chapa de aço maciça;
- Lâmina do encosto de cabeça cromada;
- Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação;
- Superfícies aparentes com pintura lisa;
- Transformador de 12 V para alimentação do refletor;
- Estofamento revestido em PVC laminado – lavável e sem costura.



REFLETOR

- Monofocal;
- Cabeçote com puxador incorporado;
- Lâmpada halógena;
- Intensidade de luz de 20.000 Lux;
- Sistema de troca fácil de lâmpadas;
- Espelho multifacetado com tratamento multicoating (produz luz fria distribuída de maneira uniforme).



EQUIPO

- Três opções: Cart, F ou Air (exclusivo para Equipo Air);
- Linhas arredondadas;
- Seleção automática das pontas, controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP);
- Suporte de pontas;
- Alma estrutural em aço;
- Corpo e capas em ABS;
- Bandeja em aço inox;
- Terminal para micromotor sem spray;
- Terminal para alta rotação;
- Seringa tríplice;
- Mangueiras lisas, leves e flexíveis;
- Braço biarticulado. Proporciona os movimentos horizontal e vertical, que facilitam o trabalho dos cirurgiões-dentistas (exclusivo para Equipo Air);
- Consultório ambidestro.

UNIDADE AUXILIAR

- Sistema Venturi;
- Sistema Vac Plus, quatro vezes mais potente que o Venturi, gera melhor desempenho ao profissional (opcional);
- Suctor AP (Alta Potência): dez vezes mais potente que Suctor Venturi, com auxílio de bomba a vácuo (opcional);
- Programa de tempo para enchimento automático de copos e circulação automática da água da bacia;
- Cuba de cuspeira em cerâmica e formas arredondadas proporcionam mais biossegurança;
- Abertura lateral (facilita a aproximação da ASB - "Auxiliar de Saúde Bucal") e removível (proporciona perfeita desinfecção dos componentes);
- Porta-copo;
- Suporte de pontas;
- Separadores de detritos.





A INOVAÇÃO QUE PRIVILEGIA A ESTÉTICA.

FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT

- ▶ Display digital;
- ▶ Bateria inteligente;
- ▶ Potência: 1.200 mW/cm²;
- ▶ 3 modos programáveis de aplicação;
- ▶ Condutor de luz de fibra óptica;
- ▶ Tempo de fotoativação: 5, 10, 15, e 20 segundos com display digital;
- ▶ Sinal sonoro: BIP a cada 5 segundos;
- ▶ Acompanha base de descanso;
- ▶ Protetor ocular giratório de fácil manuseio e posicionamento.

3 MODOS PROGRAMÁVEIS DE APLICAÇÃO

- ▶ **Contínuo:** máxima luminosidade do início ao fim da polimerização;
- ▶ **Pampa:** aumento gradual da intensidade da luz;
- ▶ **Pulsado:** acionamento pulsátil com ciclos de 1x1 segundo.



BATERIA RECARREGÁVEL

- ▶ **Sistema inteligente de desligamento automático:** a bateria desliga automaticamente em caso de subversão, o que garante uma fotoativação segura;
- ▶ **Bateria inteligente:** não é necessário descarregar completamente a bateria para efetuar nova recarga;
- ▶ Possibilita, aproximadamente, 300 disparos sem necessidade de recarga;
- ▶ Tempo de recarga completa da bateria de 4 horas.

- ▶ **PONTEIRA:** Fibra de óptica selada.



- ▶ **DISPLAY DIGITAL:** ajuste do tempo e modo de fotoativação.



O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO.

▶ PEÇAS DE MÃO

- ▶ Rolamento cerâmico proporciona maior durabilidade;
- ▶ Encaixe tipo Borden;
- ▶ Triplo spray ou único, de acordo com o modelo;
- ▶ Sistema PB (push button) ou FG (friction grip).



▶ ALTA ROTAÇÃO



TORQUE PB

TORQUE FG

▶ KIT ACADÊMICO

Alta rotação nas opções: PB (push button) ou FG (friction grip) e micromotor com ou sem spray.

▶ BAIXA ROTAÇÃO



PEÇA RETA

MICROMOTOR SEM SPRAY

MICROMOTOR COM SPRAY

CONTRA-ÂNGULO



- ▶ Possui 4 peças (alta rotação, micromotor, contra-ângulo e peça reta);
- ▶ Rolamento cerâmico;
- ▶ Cor: Prata;
- ▶ Sistema universal INTRA;
- ▶ Encaixe tipo Borden.



LINHA DE BIOSSEGURANÇA



LAVADORA
ULTRASSÔNICA
BIOFREE 6L



- ▶ Reservatório com capacidade de 6 litros;
- ▶ Painel de comando com visor LED digital do tempo de funcionamento e temperatura da água;
- ▶ Seletor para ajuste do tempo do ciclo de lavagem;
- ▶ Seletor de temperatura da água – permite lavagem com água aquecida;
- ▶ Iluminação LED interna da cuba;
- ▶ Cesta confeccionada em material termoplástico de alta resistência para acomodação dos materiais;
- ▶ Tampa transparente que facilita a visualização do conteúdo interno;
- ▶ Geradores ultrassônicos de vibração: ondas uniformemente distribuídas, que proporcionam uma limpeza mais profunda alcançando áreas inacessíveis à lavagem manual.

▶ **Design moderno e funcional:**
facilita a movimentação e garante maior durabilidade ao equipamento;

▶ **Aquecedores de cerâmica:**
garantem maior segurança, eficiência e aumentam a vida útil do equipamento;

▶ **Válvula de drenagem*:**
facilita o esvaziamento da água da lavadora;

▶ **Função de desgaseificação:**
relacionada à remoção de gotículas e bolhas de ar nas paredes do tanque, melhorando a eficiência da limpeza.



LAVADORA
ULTRASSÔNICA
BIOFREE 2L



*Sistema exclusivo Biofree 6L



SELADORA BIOPACK

- ▶ Suporte para papel grau cirúrgico com espaçamento regulável;
- ▶ Resistência isolada – inibe o risco de queima do papel;
- ▶ Regulagem de temperatura – permite ajuste para uma selagem segura e rápida;
- ▶ Fechamento mediante alavanca manual com trava;
- ▶ Cortador de papel tipo trilho: corta em ambos os sentidos;
- ▶ Chave on/off com indicador luminoso;
- ▶ Corpo em aço inox;
- ▶ Chapa de apoio frontal desmontável – produto compacto e de fácil transporte;
- ▶ Espessura de selagem de 10mm.

AUTOCLAVES (12L E 21L)

- ▶ Câmara em aço inox;
- ▶ Válvula de segurança automática;
- ▶ Maior espaço interno;
- ▶ Secagem com porta entreaberta;
- ▶ Sensor de sobreaquecimento ou 220V;
- ▶ Tempo de aquecimento: 10 a 20 minutos;
- ▶ Tempo de secagem: 30 minutos;
- ▶ Temperatura de operação [°C +-1] : 134 ou 121;
- ▶ Disponível nas capacidades: 12L ou 21L e nas versões 127 ou 220V.



DESTILADORA BIOAQUA

- ▶ Capacidade do reservatório de 4 litros;
- ▶ Botão de acionamento com desligamento automático;
- ▶ Cuba interna em aço inox;
- ▶ Parte superior desmontável, vedação entre as partes com anel de silicone;
- ▶ Velocidade de destilação de 1 litro por hora;
- ▶ Compacta – formato cilíndrico e de fácil transporte.





A MELHOR RELAÇÃO QUALIDADE E PREÇO DO BRASIL.

▶ RAIOS X

Design moderno e prático nas versões coluna móvel e parede. Bloqueio contra disparos acidentais, controle eletrônico com teclado de membrana, visualizador de LED e sistema de dupla colimação, que elimina a formação de raios no feixe principal, evitando a exposição desnecessária do profissional e do paciente, minimizando os riscos à saúde.



▶ RAIOS X DE PAREDE



▶ BOMBAS DE VÁCUO

BV D700 2C | BV D700 4C

Biossegurança ampliada por meio do sistema de sucção de alta potência para até quatro consultórios, com vazão de 200 litros por minuto, contribuindo para o controle de infecção e melhora da visualização do campo operatório.

- ▶ Bivolt;
- ▶ Partes internas em bronze, maior durabilidade;
- ▶ Pode ser instalado em todos os tipos de consultórios.





▶ ENDUS LOCALIZADOR APICAL

PRECISÃO DESDE A RAIZ.

- ▶ Compacto, leve e de fácil uso;
- ▶ Totalmente automático sem ajustes manuais ou calibração;
- ▶ Mensurações altamente sensíveis com medidas a cada 0,1 mm;
- ▶ Sem fios, com funcionamento através de pilhas AA de 1.5V.

▶ ENDUS DUO R MICROMOTOR + LOCALIZADOR APICAL

- ▶ 4 modos de programação, com movimentação recíprocante e rotatório convencional além da função localizador apical;
- ▶ Reverso automático por torque e redução de velocidade por torque;
- ▶ Bateria recarregável de alta capacidade Li-ion;
- ▶ Variação de velocidade de rotação do micromotor 125-625rpm;
- ▶ Variação de torque 0.3 - 4.0 N.cm.



▶ JET HAND

- ▶ Recipiente de bicarbonato de fácil acesso acoplado à peça de mão;
- ▶ Ponta do jato de bicarbonato autoclavável;
- ▶ Tampa transparente, posicionada na parte superior do corpo da caneta;
- ▶ Efetua mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimentos nos condutos do produto.



A MELHOR RELAÇÃO QUALIDADE E PREÇO DO BRASIL.



ULTRASSOM JET

- ▶ Bomba peristáltica;
- ▶ Chave seletora de potência (7 posições);
- ▶ Reservatório de líquido irrigante;
- ▶ Sistema de capas autoclaváveis para o dispositivo aumenta a vida útil das peças de mão.

- ▶ Acompanha 3 tips:
 - 02 Perio Sub;
 - 01 Perio Supra.

ULTRASSOM

- ▶ Pequeno e portátil
- ▶ 02 capas autoclaváveis
- ▶ Acompanha 3 tips:
 - 02 Perio Sub;
 - 01 Perio Supra.



PERIO SUB PERIO SUPRA PERIO E



REMO C REMO N REMO L REMO G

TIPS

Práticas, ergonômicas e duráveis. Proporcionam maior agilidade e precisão para o profissional, garantindo resultados satisfatórios para os pacientes.

PERIODONTIA

ENDODONTIA



SENSOR DIGITAL D700

SIMPLES, RÁPIDO E SEM ONERAR INVESTIMENTOS NA REVELAÇÃO DOS FILMES.



- ▶ Sensor tamanho 1 (área ativa - 20 x 30 mm);
- ▶ Sensor com acabamento interno em silicone, bordas com cantos arredondados para maior conforto do paciente;
- ▶ Cabo com três metros de comprimento;
- ▶ Cabo de fácil reposição;
- ▶ Capture imagens de alta definição em tempo real. Com 25 pares de linhas (teórico) e avançados recursos de processamento de imagem, você tem à disposição imagens nítidas para o melhor diagnóstico;
- ▶ Cadastre seus pacientes, capture imagens instantaneamente, laude e organize todas as imagens em segundos;
- ▶ Ampla range de ferramentas para edição como: rotação, zoom, ajuste de brilho, contraste e gama, inversão de cores, inserção de texto, setas, círculos, seleção e recorte de áreas, medição de ângulos e segmentos, barra para laudos/diagnóstico, odontograma e comparação de imagens em tela cheia;
- ▶ Salve e exporte no sistema DICOM;
- ▶ Fácil envio das imagens através de e-mail;
- ▶ Plug and play: software de fácil instalação;
- ▶ Sensor tipo CMOS;
- ▶ Número de Pixels: 1000 x 1500;
- ▶ Nível de cinza: 12 bits.



ABAIXO EXEMPLOS DE IMAGENS



REQUISITOS DO COMPUTADOR

Sistema Operacional Windows 7 Home;
Windows 7 Start;
Win 7 Pro 32bits ou 64bits
Windows 8 Pro;
Windows 8.1 Pro;
Windows 10 Pro;
Windows 10 Home.

Processador Intel I5 3.0GHz ou superior RAM 2Gb HD 500Gb Entrada
2 portas USB 2.0 livres Tipo do Sensor CMOS Resolução 25,00 pares de
linha por milímetro Tamanho 1 20 x 30mm [área ativa] Conexão USB 2.0.



D700.COM.BR | 0800 941 5650

COMPRA PELA LOJA VIRTUAL: LOJAD700.COM.BR