



CATÁLOGO  
DE PRODUTOS

**5700**  
SOLUÇÃO INTELIGENTE



**LINHA PNEUMÁTICO**

Facilita o trabalho do profissional, com movimentos precisos, gera menor esforço e maior segurança durante sua utilização.

**LINHA FLEX**

Braço fixo ajustável na coluna, permite ao profissional melhor adaptação e ergonomia.



**LINHA CART**

Permite maior mobilidade de aproximação no ambiente do consultório.

**DIFERENCIAIS DOS CONSULTÓRIOS**

- 1 ENCOSTO ENVOLVENTE
- 2 ARTICULADOR CENTRAL DO ENCOSTO
- 3 CAPA PROTETORA LATERAL
- 4 BASE ANTIDERRAPANTE (CHAPA CORTE A LASER E DEBRUM PARA EVITAR DESLIZAMENTO)
- 5 PEDAL DE COMANDO (MOVIMENTOS DE VOLTA A ZERO A 3 POSIÇÕES DE TRABALHO)
- 6 ESTOFAMENTO ANATÔMICO
- 7 ENCOSTO BIARTICULADO

**CORES PARA ESTOFADOS**




**NOVAS OPÇÕES CORES EXCLUSIVAS**



## CARACTERÍSTICAS DOS CONSULTÓRIOS

### ENCOSTO BIARTICULADO

- Encosto de cabeça biarticulado, facilita o atendimento de cadeirantes e crianças. Macio, anatômico, com linhas arredondadas oferece mais conforto ao paciente, principalmente em sessões longas.

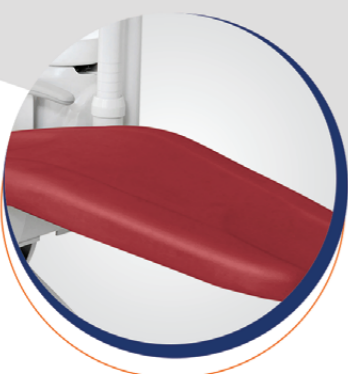

### ESTOFAMENTO ANATÔMICO

- Muito confortável e ergonômico.

### CADEIRA

- Assento e encosto com movimentos de subida e descida;
- Assento com altura mínima de 34 cm e altura máxima de 73 cm;
- Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento;
- Sistema pantográfico de elevação;
- Braços direito e esquerdo;
- Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade);
- Encosto de cabeça biarticulado;
- Base da cadeira em chapa de aço maciça;
- Lâmina do encosto de cabeça cromada;
- Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação;
- Superfícies aparentes com pintura lisa;
- Transformador de 12 V para alimentação do refletor;
- Estofamento revestido em PVC laminado – lavável e sem costura.



### PEDAL DE COMANDO

- Otimiza o trabalho dos cirurgiões-dentistas com as funções volta a zero / posição de trabalho totalmente automatizadas.



### REFLETOR

- Monofocal;
- Cabeçote com puxador incorporado;
- Lâmpada halógena;
- Intensidade de luz de 20.000 Lux;
- Sistema de troca fácil de lâmpadas;
- Espelho multifacetado com tratamento multicoating (produz luz fria distribuída de maneira uniforme).



### UNIDADE AUXILIAR

- Sistema Venturi;
- Sistema Vac Plus, quatro vezes mais potente que o Venturi, gera melhor desempenho ao profissional (opcional);
- Suctor AP (Alta Potência): dez vezes mais potente que Suctor Venturi, com auxílio de bomba a vácuo (opcional);
- Programa de tempo para enchimento automático de copos e circulação automática da água da bacia;
- Cuba de cuspeira em cerâmica e formas arredondadas proporcionam mais biossegurança;
- Abertura lateral (facilita a aproximação da ASB - "Auxiliar de Saúde Bucal") e removível (proporciona perfeita desinfecção dos componentes);
- Porta-copo;
- Suporte de pontas;
- Separadores de detritos.



### EQUIPO

- Três opções: Cart, F ou Air (exclusivo para Equipo Air);
- Linhas arredondadas;
- Seleção automática das pontas, controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP);
- Suporte de pontas;
- Alma estrutural em aço;
- Corpo e capas em ABS;
- Bandeja em aço inox;
- Terminal para micromotor sem spray;
- Terminal para alta rotação;
- Seringa tríplice;
- Mangueiras lisas, leves e flexíveis;
- Braço biarticulado. Proporciona os movimentos horizontal e vertical, que facilitam o trabalho dos cirurgiões-dentistas (exclusivo para Equipo Air);
- Consultório ambidestro.



### MOCHO

- Com sistema de elevação a gás pressurizado, amortece os movimentos e permite posicionamento adequado ao profissional.



FOTOPOLIMERIZADOR  
**OPTILIGHT**

- ▶ Display digital;
- ▶ Bateria inteligente;
- ▶ Potência: 1.200 mW/cm<sup>2</sup>;
- ▶ 3 modos programáveis de aplicação;
- ▶ Condutor de luz de fibra óptica;
- ▶ Tempo de fotoativação: 5, 10, 15, e 20 segundos com display digital;
- ▶ Sinal sonoro: BIP a cada 5 segundos;
- ▶ Acompanha base de descanso;
- ▶ Protetor ocular giratório de fácil manuseio e posicionamento.

3 MODOS  
**PROGRAMÁVEIS  
DE APLICAÇÃO**

- ▶ **Contínuo:** máxima luminosidade do início ao fim da polimerização;
- ▶ **Pampa:** aumento gradual da intensidade da luz;
- ▶ **Pulsado:** acionamento pulsátil com ciclos de 1x1 segundo.



BATERIA  
**RECARREGÁVEL**

- ▶ **Sistema inteligente de desligamento automático:** a bateria desliga automaticamente em caso de subversão, o que garante uma fotoativação segura;
- ▶ **Bateria inteligente:** não é necessário descarregar completamente a bateria para efetuar nova recarga;
- ▶ Possibilita, aproximadamente, 300 disparos sem necessidade de recarga;
- ▶ Tempo de recarga completa da bateria de 4 horas.



▶ **PONTEIRA:**  
Fibra de óptica selada.

▶ **DISPLAY DIGITAL:**  
ajuste do tempo e modo de fotoativação.

▶ **PEÇAS  
DE MÃO**

- ▶ Rolamento cerâmico proporciona maior durabilidade;
- ▶ Sistema universal Borden;
- ▶ Triplo spray ou único, de acordo com o modelo;
- ▶ Cores: prata, azul ou rosa;
- ▶ Sistema PB (push button) ou FG (friction grip).



▶ **ALTA  
ROTAÇÃO**



▶ **BAIXA  
ROTAÇÃO**



▶ **KIT  
ACADÊMICO**

Alta rotação nas opções: PB (push button) ou FG (friction grip) e micromotor com ou sem spray.

- ▶ Possui 4 peças (alta rotação, micromotor, contra-ângulo e peça reta);
- ▶ Rolamento cerâmico;
- ▶ Cores: prata, azul ou rosa;
- ▶ Sistema universal Borden;
- ▶ Bolsa e lubrificante [Item Opcional].



Registro de produtos junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. Produtos de baixa rotação: Micromotor, Peça reta, Contra-ângulo - 10101130064; Produtos de alta rotação: FG, PB, Torque FG, Torque PB - 10101130055; Autoclaves 12L e 21L - 10101130070; Ultrassom - 10101130064; Ultrassom Jet - 10101130069; Raio X - 10101130059; Fotopolimerizador e Clareador DB 686 - 10101130063; Sensor Intraoral - 10101130081. As bombas de vácuo não são consideradas como produtos médicos pela Anvisa. As cores podem ter sofrido alterações na reprodução gráfica. A Dabi Atlante reserva-se o direito de realizar alterações no design e especificações técnicas mediante a autorização pela Anvisa para prosseguir no aperfeiçoamento dos mesmos. Fotos ilustrativas. Versão Jan/2017.



A MELHOR RELAÇÃO QUALIDADE E PREÇO DO BRASIL.

## ▶ RAIOS X

Design moderno e prático nas versões coluna móvel e parede. Bloqueio contra disparos acidentais, controle eletrônico com teclado de membrana, visualizador de LED e sistema de dupla colimação, que elimina a formação de raios no feixe principal, evitando a exposição desnecessária do profissional e do paciente, minimizando os riscos à saúde.



▶ RAIOS X DE PAREDE



## ▶ BOMBAS DE VÁCUO

BV D700 2C | BV D700 4C

Biossegurança ampliada por meio do sistema de sucção de alta potência para até quatro consultórios, com vazão de 200 litros por minuto, contribuindo para o controle de infecção e melhora da visualização do campo operatório.

- ▶ Bivolt;
- ▶ Partes internas em bronze, maior durabilidade;
- ▶ Pode ser instalado em todos os tipos de consultório.



## ▶ ULTRASSOM JET

Bomba peristáltica; chave seletora de potência (7 posições); reservatório de líquido irrigante; sistema de capas autoclaváveis para o dispositivo aumenta a vida útil das peças de mão.

- ▶ Acompanha 3 tips:
  - 02 Perio Sub;
  - 01 Perio Supra.



## ▶ ULTRASSOM

- ▶ Pequeno e portátil
- ▶ 02 capas autoclaváveis
- ▶ Acompanha 3 tips:
  - 02 Perio Sub;
  - 01 Perio Supra.



PERIO SUB PERIO SUPRA PERIO E

REMO C REMO N REMO L REMO G

## ▶ TIPS

Práticas, ergonômicas e duráveis. Proporcionam maior agilidade e precisão para o profissional, garantindo resultados satisfatórios para os pacientes.

Todas as pontas ultrassônicas possuem garantia de 3 meses.

▶ PERIODONTIA

▶ ENDODONTIA



LINHA DE BIOSEGURANÇA

### LAVADORA ULTRASSÔNICA BIOFREE 6L



- ▶ Reservatório com capacidade de 6 litros;
- ▶ Painel de comando com visor LED digital do tempo de funcionamento e temperatura da água;
- ▶ Seletor para ajuste do tempo do ciclo de lavagem;
- ▶ Seletor de temperatura da água – permite lavagem com água aquecida;
- ▶ Iluminação LED interna da cuba;
- ▶ Cesta confeccionada em material termoplástico de alta resistência para acomodação dos materiais;
- ▶ Tampa transparente que facilita a visualização do conteúdo interno;
- ▶ Geradores ultrassônicos de vibração: ondas uniformemente distribuídas que proporcionam uma limpeza mais profunda alcançando áreas inacessíveis à lavagem manual.

### LAVADORA ULTRASSÔNICA BIOFREE 2L

- ▶ **Design moderno e funcional:** facilita a movimentação e garante maior durabilidade ao equipamento;
- ▶ **Aquecedores de cerâmica:** garantem maior segurança, eficiência e aumentam a vida útil do equipamento;
- ▶ **Válvula de drenagem\*:** facilita o esvaziamento da água da lavadora;
- ▶ **Função de desgaseificação:** relacionada à remoção de gotículas e bolhas de ar nas paredes do tanque, melhorando a eficiência da limpeza.



\*Sistema exclusivo Biofree 6L.



### SELADORA BIOPACK

- ▶ Suporte para papel grau cirúrgico com espaçamento regulável;
- ▶ Resistência isolada – inibe o risco de queima do papel;
- ▶ Regulagem de temperatura – permite ajuste para uma selagem segura e rápida;
- ▶ Fechamento mediante alavanca manual com trava;
- ▶ Cortador de papel tipo trilho: corta em ambos os sentidos;
- ▶ Chave on/off com indicador luminoso;
- ▶ Corpo em aço inox.
- ▶ Chapa de apoio frontal desmontável – produto compacto e de fácil transporte;
- ▶ Espessura de selagem de 10mm.

### AUTOCLAVES (12L E 21L)

- ▶ Câmara em aço inox;
- ▶ Tempo de secagem: 30 minutos;
- ▶ Válvula de segurança automática;
- ▶ Temperatura de operação [°C +/-1]: 134 ou 121;
- ▶ Maior espaço interno;
- ▶ Disponível nas capacidades: 12L ou 21L e nas versões 127 ou 220V.
- ▶ Secagem com porta entreaberta;
- ▶ Sensor de sobreaquecimento ou 220V;
- ▶ Tempo de aquecimento: 10 a 20 minutos.



### DESTILADORA BIOAQUA

- ▶ Capacidade do reservatório de 4 litros;
- ▶ Botão de acionamento com desligamento automático;
- ▶ Cuba interna em aço inox;
- ▶ Parte superior desmontável, vedação entre as partes com anel de silicone;
- ▶ Velocidade de destilação de 1 litro por hora;
- ▶ Compacta – formato cilíndrico e de fácil transporte.





[D700.COM.BR](http://D700.COM.BR) | 0800 941 5650