



LINHA DE PERIFÉRICOS
E PEÇAS DE MÃO

DABI ATLANTE



QUEM GOSTA

DE TECNOLOGIA
DE PONTA PREFERE A
DABI ATLANTE.

O seu consultório vai ganhar em comodidade, conforto e eficiência com os **periféricos da Dabi Atlante**. Opções não faltam para tornar o seu dia a dia profissional mais agradável. **O motivo?** Investimos em pesquisa e desenvolvimento, aliando design e funcionalidade. Não é para menos, ser a marca líder em produtos tecnológicos requer responsabilidade e pioneirismo. Já as **Peças de Mão Dabi Atlante** foram projetadas para complementar o seu talento. Desenvolvidas com materiais de qualidade superior, oferecem eficiência e agilidade para o seu trabalho. Possuem design diferenciado e são mais leves, o que sugere excelente desempenho e alta precisão, além de proporcionarem segurança e durabilidade.

E TUDO ISSO PORQUE SOMOS INOVADORES E EXIGENTES.

AFINAL, SER RECONHECIDA PELA QUALIDADE É FUNDAMENTAL PARA A DABI.

RAIOS X SELETRONIC

QUALIDADE SUPERIOR DE IMAGEM
COM SISTEMA DE DUPLA COLIMAÇÃO
E COMANDO INTELIGENTE.



DISPOSITIVO DE COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPO

Ajuste fino do tempo de disparo, atuando em conjunto com o Regulador de Tensão, corrigindo automaticamente o tempo de exposição conforme as oscilações elétricas.

CAIXA DE COMANDO INTELIGENTE

Oferece segurança de realizar os procedimentos através de ajustes automáticos gerados pelo próprio aparelho.

REGULADOR DE TENSÃO DE SÉRIE

Estabilizador interno automático de tensão faz com que a emissão seja mantida no padrão de tensão (kVp).

COLUNA COM PÉS EM U

Possibilita maior mobilidade.



MODELO PAREDE

Com braço pantográfico superdimensionado de série: alcance de 2 metros, relação parede, posicionamento periapical.



VEJA COMO É SIMPLES:

- 1) Selecione o tipo de radiografia desejada;
- 2) Indique se o paciente é adulto ou criança;
- 3) Escolha o tipo de filme (D – E – F ou Sensor Digital);
- 4) Automaticamente o aparelho calcula e sugere o tempo de exposição.

Obs.: Os tempos sugeridos são pré-programados, mas o profissional pode reprogramá-los.

Tensão Elétrica	127 ou 200 V
Potência	1,20 kVa
Potência / Cabeçote	70 kVp
Amperagem / Cabeçote	8mA
Cabo	3 Metros

RAIOS X ELETRONIC 70X

SIMPLICIDADE, RAPIDEZ E
SEGURANÇA SEM FORMAÇÃO
DE RAIOS SECUNDÁRIOS.



CÂMARA EXPANSORA EM BORRACHA ESPECIAL

Permite disparos consecutivos sem o risco de explosão do cabeçote pelo aquecimento do óleo.

CAIXA DE COMANDO INTELIGENTE

Oferece segurança contra disparos acidentais.

REGULADOR DE TENSÃO - OPCIONAL

Estabilizador interno automático de tensão faz com que a emissão seja mantida no padrão de tensão (kVp).

COLUNA MÓVEL COM PÉS EM U

Facilidade de movimentação e encaixe perfeito.



VEJA COMO É SIMPLES:

- 1) Selecione o tempo de exposição;
- 2) Pressione e mantenha pressionado o botão disparador;
- 3) O sistema fica travado por alguns segundos para garantir que não ocorra disparos acidentais.

Tensão Elétrica	127 ou 200 V
Potência	1,20 kVa
Potência / Cabeçote	70 kVP
Amperagem / Cabeçote	8mA
Cabo	3 Metros

new IDA

A EVOLUÇÃO DO SEU OLHAR.

A EVOLUÇÃO DO SEU OLHAR

A radiografia evoluiu para o formato digital, e o sensor intraoral é resultado dessa mudança.

E a partir de agora, você vai conhecer tudo o que o New IDA é capaz de oferecer para os seus diagnósticos. Com mais tecnologia e precisão.



POR QUE COMPRAR UM NEW IDA?

- Praticidade e velocidade no atendimento de seus pacientes. Não é necessário ocupar o tempo clínico do profissional com a revelação das radiografias;
- As imagens ficam salvas no servidor e protegidas frente à influência do tempo, eliminando a necessidade de arquivamento físico;
- A utilização de uma tecnologia digital na geração de imagens periapicais agrega valor ao tratamento, possibilitando a explanação dos diagnósticos na tela do computador;
- Redução do tempo de exposição utilizado na realização de exames periapicais;
- Não necessita da utilização de agentes químicos para o processo de revelação. Não gera resíduos para o meio ambiente;
- A imagem digital possibilita a aplicação de ferramentas que permitem a elaboração de diagnósticos mais precisos;
- A imagem digital facilita o tráfego de informação entre profissionais e entre operadoras odontológicas;
- Acompanha software completo e de fácil utilização para cadastro de clientes, arquivamento e manipulação das imagens.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- Sensor Intraoral com **tamanho 1, área ativa de 20mm x 30mm;**
- Compatível com a maioria dos equipamentos de **Raios X Intraoral;**
- Sensor com acabamento interno em silicone, **mais resistente a quedas;**
- **Cabo de três metros,** possibilitando maior distância entre o sensor e o computador;
- **Cabo de fácil reposição;**
- **Plug and Play,** software de fácil instalação;
- Acompanha **case para transporte.**





Tipo de Sensor: CMOS

Número de Pixels: 1000 x 1500

Nível de cinza: 12 bits

Resolução: 25 pares de linha por milímetro

A APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA
NA VIDA MODERNA.

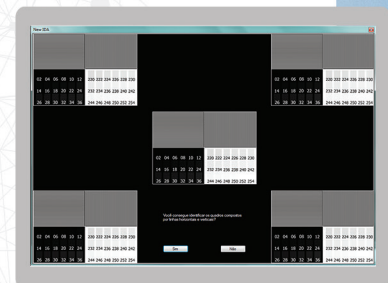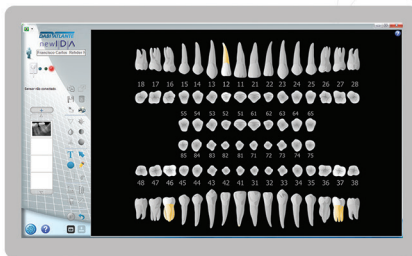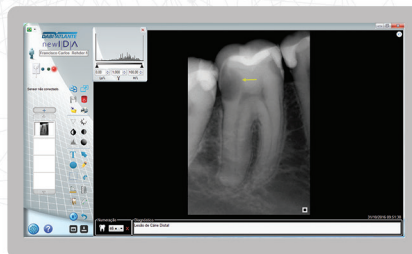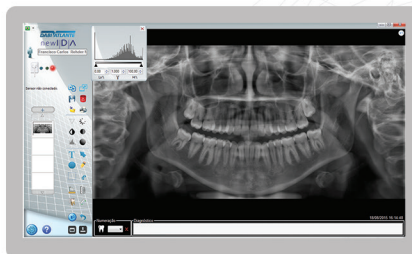

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO:

Sistema Operacional: Windows 7 (versões - Pro 32-bit; Pro 64-bit; Home; Start). Windows 8 (versões Pro; 8.1 Pro). Windows 10 (versões Pro; 10 Home). **Processador:** Intel I5 3.0GHz ou superior. **RAM:** 2 Gb. **HD:** 500 Gb. **Entrada:** 01 porta USB 2.0 livre.

PROFILAXIA

PIONEIRISMO EM PROFILAXIA EM UMA LINHA
COM MAIS RECURSOS, TECNOLOGIA E EFICIÊNCIA.



PROFI CLASS

- Ultrassom para remoção de biofilme mineralizado ou para tratamento endodôntico;
- Jato de bicarbonato para remoção de biofilme desmineralizado;
- Exclusiva tecla seletora de potência para pontas diamantadas utilizadas em Dentística;
- 4 níveis de rotação da bomba peristáltica;
- Reservatório de água incorporado ao aparelho;
- Acompanha 2 Tips Perio Sub e 1 Perio Supra.

PROFI NEO

- Ultrassom para remoção de biofilme mineralizado ou para tratamento endodôntico;
- Jato de bicarbonato para remoção de biofilme desmineralizado;
- Chave seletora para ajuste rápido da potência de remoção ou terapia endodôntica;
- 4 níveis de rotação da bomba peristáltica;
- Reservatório de água incorporado ao aparelho;
- Acompanha 2 Tips Perio Sub e 1 Perio Supra.



PROFI NEO US


- Ultrassom para remoção de biofilme mineralizado;
- Chave seletora para ajuste rápido da potência de remoção ou terapia endodôntica;
- Dispensa ligações de água e ar comprimido;
- Permite portabilidade entre consultórios;
- Reservatório de água incorporado ao aparelho;
- Acompanha 2 Tips Perio Sub e 1 Perio Supra.



Altura (mm)	215
Largura (mm)	310
Comprimento (mm)	250
Tensão (V)	99-240V
Potência (VA)	55 VA
Frequência (KHz)	24 a 30

TIPS

SOLUÇÃO INOVADORA PARA
TRATAMENTOS DENTÁRIOS.

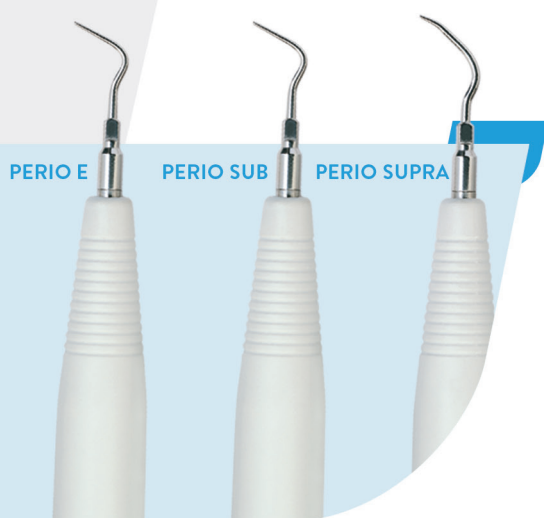

PERIODONTIA

**MELHOR ÂNGULO
E MAIOR COMPRIMENTO**

Pontas indicadas para a remoção de
cálculo dental em todas as superfícies
dentais supra e sub gengivais.

ENDODONTIA

Pontas indicadas para remoção de
instrumentos fraturados, remoção de
pinos intra radiculares, cimentos, etc.



BIOSSEGURANÇA

PRATICIDADE, DURABILIDADE E
SEGURANÇA NA ESTERILIZAÇÃO.



AUTOCLAVE 12L

- Autoclave atestada por testes biológicos;
- Tempo de esterilização pré-programado;
- Comandos manuais;
- Câmara de esterilização em aço inox;
- Secagem com porta entreaberta;
- Vedação da porta em silicone de alta performance;
- Abastecimento manual da câmara;
- Sistema de segurança automático.

Modelo	12LX Blanche
Pressão de esterilização	2,3 kgf/cm ² ± 0,2 kgf/cm ²
Temperatura de operação	134°C
Tempo de esterilização	15 minutos
Alimentação elétrica	220V-50/60Hz-3,0A-654W 110-127V-6,0A-654W
Profundidade	491mm
Largura	426mm
Altura (mm)	323mm
Peso	22kg

AUTOCLAVE 21L

- Autoclave atestada por testes biológicos;
- Tempo de esterilização pré-programado;
- Comandos manuais;
- Câmara de esterilização em aço inox;
- Secagem com porta entreaberta;
- Vedação da porta em silicone de alta performance;
- Abastecimento manual da câmara;
- Sistema de segurança automático.

Modelo	21L
Pressão de esterilização	2,3 kgf/cm ² ± 0,2 kgf/cm ²
Temperatura de operação	134°C
Tempo de esterilização	15 minutos
Alimentação elétrica	220V-50/60Hz-3,0A-654W 110-127V-6,0A-654W
Profundidade	670mm
Largura	460mm
Altura (mm)	400mm
Peso	32kg



BOMBA DE VÁCUO CICLONE

(1700)

POTÊNCIA E EFICIÊNCIA
A SERVIÇO DA BIOSSEGURANÇA
DO CONSULTÓRIO.

- Eficácia para o profissional. Conforto para o paciente;
- Sucção de 500mm/Hg, com vazão de 200 litros/min, atende à demanda de até 4 consultórios;
- 2C 0,5HP/ 4C 1,0HP;
- Motor com eixo de aço inox;
- Flange, rotor e tampa de bronze;
- Alta resistência à oxidação, elevada vida útil;
- Reduz em até 90% a microbiota suspensa, formada pelo spray do alta rotação ou jato de bicarbonato.

- Cobertura acústica com dimensões reduzidas*.

*Opcional.



COMPONENTES INTERNOS EM BRONZE

Metal nobre que proporciona uma alta durabilidade à corrosão, aumentando a vida útil do produto.

Voltagem de alimentação	220Vac ± 10% 60Hz 240Vac ± 10% 50Hz
Ciclo/Frequência	60Hz
Potência do motor	0,5HP/1HP
Consumo de água	0,25/min
Pressão de água	14PSI ± 2

EIXO EM AÇO INOX

Proporciona uma alta durabilidade à corrosão, aumentando a vida útil do produto.

Níveis de vácuo	500mm/Hg
Deslocamento/Vazão de ar	200 l/min
Peso	35kg
Altura	378mm
Comprimento	375mm
Largura	245mm
Consumo de energia	1650VA ± 10%

COMPRESSORES DE AR

OS COMPRESSORES DABI ATLANTE FORAM DESENVOLVIDOS PARA TRAZER MAIS MODERNIDADE E TECNOLOGIA PARA O SEU CONSULTÓRIO. SUPERSILENCIOSOS, MANTÊM UM AMBIENTE TRANQUILO E LIVRE DE RUÍDOS DURANTE A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.



- Isento de óleo;
- Motor de 2 pistões com 1,12 HP / 830W (127V) e 1,14 HP / 1100W (220V);
- Protetor térmico contra sobreaquecimento;
- Filtro de saída de ar;
- Adequado para 1 consultório;
- Pintura interna do reservatório antioxidante;
- Capacidade do tanque de 40 litros;
- Fluxo de ar: 212 litros/min.

- Isento de óleo;
- Cabeçote duplo com 2 motores e 2 pistões cada, com 1,12 HP / 1660W (127V) e 1,14 HP / 2200W (220V);
- Protetor térmico contra sobreaquecimento;
- Filtro de saída de ar;
- Adequado para 2 consultórios;
- Pintura interna do reservatório antioxidante;
- Capacidade do tanque de 65 litros;
- Fluxo de ar: 424 litros/min.



LINHA DE CONSUMO

CONHEÇA E UTILIZE OS PRODUTOS RECOMENDADOS PELA DABI ATLANTE.

LIMP CLAVE

Desenvolvido para limpeza e conservação de autoclaves e esterilizadores, remove gorduras, muco, restos de tecidos, sangue, sujeiras e resíduos orgânicos em geral, retardando futuros depósitos e incrustações, inibindo possíveis corrosões.



BICARBONATO DE SÓDIO

Exclusivo para uso odontológico na remoção do biofilme não mineralizado. Embalagem que garante máxima proteção para o uso contínuo do produto, embalagem plástica com tampa rosqueável, contendo 250g para proximadamente 6 profilaxias.

PEÇAS DE MÃO



SILENT MRS 400 PB

- Peso: Borden 37 g / Midwest 44 g;
- Rotação: 400.000 rpm;
- Consumo de ar: 42 l/min;
- Pressão: 30 psi;
- Diâmetro de cabeça: 11 mm;
- Altura de cabeça: 14,7 mm;
- Consumo de água no spray: 42 ml/min;
- Nível sonoro: 69 dB;
- Alumínio;
- Rolamento cerâmico.



SILENT MRS 400 FG

- Peso: Borden 37 g / Midwest 44 g;
- Rotação: 400.000 rpm;
- Consumo de ar: 42 l/min;
- Pressão: 30 psi;
- Diâmetro de cabeça: 11 mm;
- Altura de cabeça: 12,3 mm;
- Consumo de água no spray: 42 ml/min;
- Nível sonoro: 69 dB;
- Alumínio;
- Rolamento cerâmico.



FORZA CERAMICS BORDEN MRS 400

- Peso: 77 g;
- Rotação: 400.000 rpm;
- Consumo de ar: 42 l/min;
- Pressão: 30 psi;
- Diâmetro de cabeça: 11 mm;
- Altura de cabeça: 14,7 mm;
- Consumo de água no spray: 42 ml/min;
- Nível sonoro: 69 dB;
- Latão;
- Rolamento cerâmico.

ALTA ROTAÇÃO



FORZA CERAMICS QC FO MRS 400

- Peso: 77 g;
- Rotação: 400.000 rpm;
- Consumo de ar: 42 l/min;
- Pressão: 35 psi;
- Diâmetro de cabeça: 11 mm;
- Altura de cabeça: 14,7 mm;
- Consumo de água no spray: 42 ml/min;
- Nível sonoro: 69 dB;
- Latão;
- Rolamento cerâmico.



SILENT MS 350 PB

- Peso: Borden 37g / Midwest 44 g;
- Rotação: 350.000 rpm;
- Consumo de ar: 42 l/min;
- Pressão: 30 psi;
- Diâmetro de cabeça: 13,2 mm;
- Altura de cabeça: 10,8 mm;
- Consumo de água no spray: 42 ml/min;
- Nível sonoro: 69 dB;
- Alumínio;
- Rolamento cerâmico.



SILENT MS 350 FG

- Peso: Borden 37g / Midwest 44 g;
- Rotação: 350.000 rpm;
- Consumo de ar: 42 l/min;
- Pressão: 30 psi;
- Diâmetro de cabeça: 10,8 mm;
- Altura de cabeça: 13,2 mm;
- Consumo de água no spray: 42 ml/min;
- Nível sonoro: 69 dB;
- Alumínio;
- Rolamento cerâmico.

ENGATES



ENGATE RÁPIDO BORDEN

Acoplável em peça de mão com engate rápido (Borden).



ENGATE RÁPIDO MIDWEST

Acoplável em peça de mão com engate rápido (Midwest).

PEÇAS DE MÃO



CONTRA-ÂNGULO ROC 20:1

- Modelos 20:1;
- Corpo em alumínio anodizado;
- Rotação de entrada máxima de 30.000 rpm (20:1);
- Torque máximo de 55 N.cm;
- Fixação da broca friction grip;
- Sistema intra de engate;
- Pinça com diâmetro entre 2,334 e 2,350 mm conforme norma ISO 1797-1.

PEÇA RETA

- Corpo em alumínio anodizado;
- Rotação 1:1;
- Fixação da broca por pinça;
- Sistema intra de engate;
- Pinça com diâmetro entre 2,334 e 2,350 mm conforme norma ISO 1797-1.



BAIXA ROTAÇÃO



■ MICROMOTOR N270

- Mais leve, com corpo de alumínio;
- Permite acoplar facilmente a Peça Reta e o Contra-ângulo;
- Proporciona alto torque em baixa velocidade, baixo nível de ruído e mais conforto.



■ CONTRA-ÂNGULO

- Corpo em alumínio anodizado;
- Contra-ângulo 1:1;
- Cabeça reduzida;
- Fixação da broca por trava;
- Sistema intra de engate;
- Eixo com diâmetro entre 2,334 e 2,350 mm conforme norma ISO 1797-1.

KIT ACADÊMICO

A MELHOR ESCOLHA PARA QUEM
QUER COMEÇAR BEM NA PROFISSÃO.



Composto de peça de mão de alta rotação,
micromotor, contra-ângulo, peça reta,
adaptador, estojo e óleo lubrificante.



ÓLEO LUBRIFICANTE

USE OS PRODUTOS
RECOMENDADOS PELA DABI.

Óleo mineral de baixa viscosidade. Detém e previne a oxidação devido à umidade de ar. Lubrifica, limpa e protege as peças de mão odontológicas. Não contém CFC. Para baixa e alta rotações.



FOTOPOLIMERIZADOR



■ OPTILIGHT MAX A BATERIA

- Aparelho sem fio;
- 3 modos programáveis de aplicação;
- Contínuo: máxima luminosidade do início ao fim da polimerização;
- Rampa: aumento gradual da intensidade da luz;
- Pulsado: acionamento pulsante com ciclos de 1x1 seg;
- Tempo de operação programável: 5, 10, 15 e 20 segundos;
- Sinal sonoro: BIP a cada 5 segundos;
- LED de alta potência com intensidade de luz acima de 1000 mW/cm²;
- Condutor de luz de fibra óptica 100% coerente;
- Base de descanso com carregador de bateria: com LED indicador de carga da bateria;
- Sistema stand-by: desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização;
- Bateria inteligente recarregável.



DABIATLANTE.COM.BR | 0800 941 5650

CONVERSE COM NOSSOS CONSULTORES: ☎ (16) 99994-7842

COMPRA PELA LOJA VIRTUAL: LOJADABI.COM.BR